

3L *Harvard* massage chair

 preštudujte si a uchovajte tento návod

Masážne kreslo President A86



Massage chair

Ďakujeme za zakúpenie produktu. Prosím pozorne si prečítajte návod, aby ste vedeli narábať s kreslom správne pred jeho použitím. Prosím venujte viac pozornosti dôležitým bezpečnostným upozorneniam a riadne si uschovajte tento návod pre budúce použitie. Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať náčres a popis produktu bez hocijakých ďalších upozornení. Vztahuje sa na prevedenie produktu.

OBSAH

Bezpečnosť a poučenie

Popis funkcií a komponentov

Funkcie

Spôsob používania

Špecifikácie produktu



1. Dôležité bezpečnostné upozornenie



- Neněchajte deťom chytať pohyblivé časti produktu
- Používajte dobré uzemnenie napájania vhodné pre tento produkt.
- Prosím vypnite od zásuvky po použití alebo pred čistením, vyhnite sa zraneniu alebo poškodeniu produktu.
- Prosím obsluhujte produkt podľa inštrukcii v tomto návode.
- Nepoužívajte doplnky, ktoré nie sú príbalené/ doporučené.
- Nepoužívajte produkt vonku/ v exteriéri.
- Prosím dôkladne si prečítajte manuál pred použitím.
- Iné využitie ako je uvedené v manuály je zakázané.
- 15 minút denne je odporúčaný čas pre 1 osobu
- Nepoužívajte ak je koža deravá alebo veľmi poškodená.
- Nepoužívajte ak je poškodený plastový kryt alebo kabeláž.
- Nepoužívajte ak je vetrací otvorí zakrytý alebo neprechodný.
- Nevhadzujte nič do vnútra zariadenia.
- Nikdy nezaspiť počas používania zariadenia
- Nepoužívajte ak ste kontzumovali alkohol alebo ak je Vám nevoľno.
- Nepoužívajte minimálne hodinu po jedle.
- Nepoužívajte masáž príliš silno aby ste si neprivodili zranenie

2. Prostredie pre použitie

- Nepoužívajte produkt pod veľkou teplotou a vo vlhkom prostredí ako je napríklad kúpeľňa a podobne.
- Nepoužívajte kreslo pri náhlych teplotných zmenách, vždy počkajte pred zapnutím na ustálenie teploty.
- Nepoužívajte v prašnom, leptavom alebo vlhkom prostredí.
- Nepoužívajte produkt kde nie je dostatok miesta a kde je zlé vetranie

3. Ľudia, ktorý nie sú vhodný na používanie tohto produktu.

- Ľudia trpiaci osteoporózou nie sú vhodný na používanie produktu.
- Ľudia trpiaci srdcovými poruchami alebo nosia elektronické lekárske zariadenie ako napríklad srdcový kardiostimulátor nie sú vhodný na používanie produktu
- Ľudia so zvýšenou teplotou (horúčkou) nie sú vhodný na používanie produktu.
- Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu nie sú vhodné na používanie tohto produktu.
- Zranené osoby a ľudia s kožnými ochoreniami nie sú vhodný na používanie kresla.
- Deťom mladším ako 14 rokov alebo ľuďom s mentálnym postihnutím bez dozoru nie je umožnené používať produkt.
- Ľuďom, ktorým bolo povedané doktorom, že majú odpočívať alebo ľudia čo sa cítia chorí nie sú vhodní na používanie produktu.
- S mokrým telom je vstup na produkt zakázaný.

4. Bezpečnosť.

- Preverte či napätie vyhovuje špecifikácii tohto produktu.

- Voda sa nesmie dostať do vnútra produktu aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu zariadenia.
- Nepoškodte elektrické vodiče, nemeňte obvody tohto produktu.
- Nepoužívajte mokrú látku na čistenie elektrických častí (prepínač, zásuvka).
- Buďte mimo produktu v prípade výpadku elektrického prúdu, vyvarujete sa zraneniu ak prúd znova naskočí.
- Prestaňte používať produkt ak sa správa neprírodzene a okamžite kontaktujte svojho predajcu.
- Prestaňte používať produkt ak cítite nevoľnosť a konzultujte zdravotný stav s lekárom.
- Produkt nie je určený pre osoby (vrátané deti) so zníženou fyzickou, vnemovou, mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ nemajú dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania produktu od zodpovednej osoby pre ich bezpečie pre bezpečnú obsluhu zariadenia.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí aby sa nehrali a nezranili používaním produktu.
- Ak sú káble vodičov poškodené, musí byť produkt vrátený na miesto výroby, je to servisná služba, ktorú vykoná kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhlí nebezpečiu.

5. Údržba.



- Technická údržba produktu by mala byť vykonaná školenou, alebo predajcom poučenou osobou, používatelia majú zakázané rozoberať a spravovať produkt.
- Nezabudnite odpojiť zo zásuvky po používaní.
- Nepoužívajte produkt ak je poškodená zásuvka.
- Ak produkt nebude dlho používaný, prosím zabezpečte kabeláž a udržiavajte produkt v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote minimálne 10°.
- Nenechávajte produkt pod veľkou teplotou, blízko ohňa a vyhnite sa dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Poškodené káble musia byť počas záručnej doby nahradené výrobcom (servisným technikom alebo kvalifikovanou poverenou osobou). Vyhnite sa nebezpečenstvu.
- Produkt čistite suchou handričkou. Nepoužívajte nevhodné čističe (benzín, alkohol...)
- Mechanické súčiastky tohto produktu sú špeciálne navrhnuté a zostrojené, **nemeňte ich za iné.**
- Nepoužívajte predmety s ostrými hranami pri manipulácii s kreslom.
- Netlačte kreslo po nerovnú povrchu, produkt by mal byť nadvihnutý pred sťahovaním a posúvaním
- **Kreslo používajte striedavo, nepoužívajte nepretržite po dlhú dobu.**

6. Riešenie bežných porúch a problémov.

- Je prirodzené, že produkt vydáva pohybujúce sa zvuky pri používaní.
- Ak ovládač nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku či sú pevne pripojené a presvedčte sa že je prepínač zapnut v polohe 1 (on).
- Ak produkt dopracuje, automaticky sa vypne; ak produkt pracuje nepretržite po dlhú dobu, teplotná ochrana dá produkt automaticky do vypnutého režimu a kreslo by malo byť použiteľné opäť za 30minút.



Názvy a funkcie komponentov

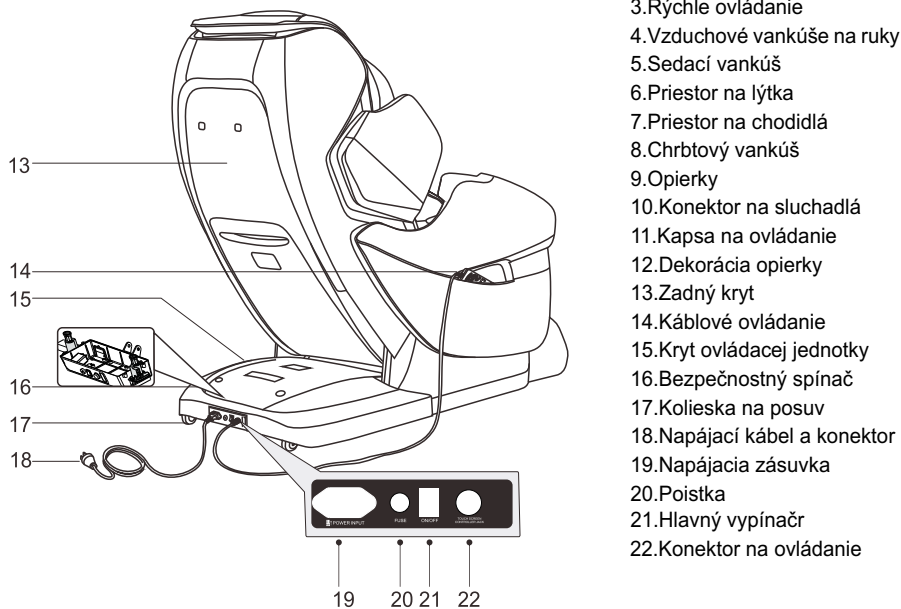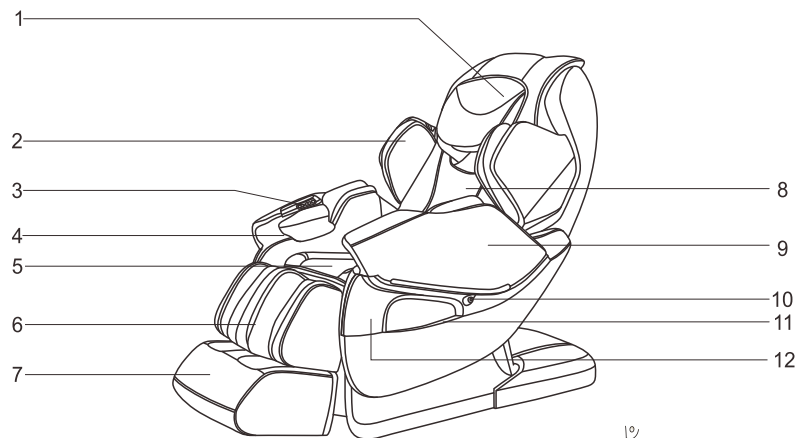

- 1.Hlavový vankúš
- 2.Ramenné airbagy
- 3.Rýchle ovládanie
- 4.Vzduchové vankúše na ruky
- 5.Sedací vankúš
- 6.Priestor na lýtka
- 7.Priestor na chodidlá
- 8.Chrbtový vankúš
- 9.Opierky
- 10.Konektor na sluchadlá
- 11.Kapsa na ovládanie
- 12.Dekorácia opierky
- 13.Zadný kryt
- 14.Káblové ovládanie
- 15.Kryt ovládacej jednotky
- 16.Bezpečnostný spínač
- 17.Kolieska na posuv
- 18.Napájací kábel a konektor
- 19.Napájacia zásuvka
- 20.Poistka
- 21.Hlavný vypínač
- 22.Konektor na ovládanie

Funkcie

- Tento produkt ponúka sadu inteligentných 3D mechanických rúk, ktoré sa hýbu hore a dole, vysúvajú dopredu a dozadu a majú 4 riadené masážne kolieska.
- Ramenná časť je navrhnutá s automatickou detekciou a s funkciou doladenia pozície; krivky tela a masážne body sa detekujú automaticky a nastaví rozostupy a úroveň masážnych hlavíc pohybom vpred a vzad v závislosti na zistenej krivke tela a masážnych bodov, tak, aby bola masáž čo najviac prirodzená a účinná.
- Pohodlná, jednoduchá, odstraňujúca bolesť, tlaková, krútenie pásu a iné špecifické masážne funkcie ponúka toto kreslo.
- Sada s dvoma M1 a M2 pamäťovými masážnymi funkciami
- Manuálne nastavenie masáže chrbta v troch možnostiach: celková, čiastočná a zafixovaná pozícia; 6 masážnych metód na chrbte: stláčanie, hnetanie, tapping, shiatsu, hnetanie a klepanie a 3 D; 5 úrovní rýchlosti masáže; pri masáži tapping a shiatsu môžete nastaviť aj úroveň šírky - rozstup masážnych hlavíc nastaviteľný v 5 pozíciách
- Vzduchová masáž rúk (8 zabudovaných airbagov), vzduchová masáž ramien (4 zabudované airbagy), nastaviteľné 3 stupne intenzity
- Vzduchová masáž nôh a chrbta: vzduchová masáž na chrbte (4 zabudované airbagy), masáž sedacích svalov (5 vstavaných airbagov) tlaková masáž nôh (36 vstavaných airbagov), nastaviteľné 3 stupne intenzity.
- Funkcia prehrávania MP3 z telefónu, vstavané 3 D digital audio pri ramenách
- Infra vyhrievanie chrbta, pomocou uhlíkových vlákien
- Funkcia ZERO SPACE - kreslo môže byť umiestnené pri stene
- Vysúvacie ukončenie na chodidlá sa prispôsobí výške osoby
- Naklápanie podnožky, sklápanie chrbtovej opierky
- Funkcia Auto-nastavenie, masážne ruky sa automaticky vrátia do pôvodnej polohy po vypnutí prístroja.
- VFD displej
- Efektívne LED podsvietenie - modré
- bezdrôtové Bluetooth prehrávanie
- Pomocou pripojenia Bluetooth je možné aplikáciou ovládať masážne kreslo musí to podporovať systém
- Tlačidlá na pravej opierke pre rýchlu voľbu umožňuje nastaviť polohu a sklon nôh, opierku a rýchle vypnutie.




Funkcie

1. Magnetoterapia

- kreslo má 8ks magnetov v lýtkovej časti
- magnety sú vyrobené v najvyššej kvalite a štandardoch, intenzita je 73mTi

2. Prehrávanie hudby


- konektor na prehrávanie v ľavej opierke
- použijete sluchadlá na prehrávanie hudby počas masáže

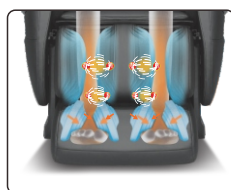

Magnetoterapia



Konektor

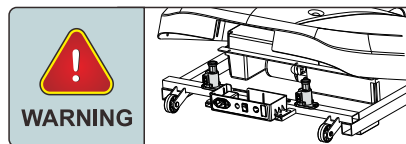

Bezpečnostný vypínač na napájacej skrinke. Ak vznikne nadmerná záťaž alebo tlak na zadnú spodnú časť kresla (plastový kryt), sklápanie sa automaticky zastaví, aby sa predišlo škodám a zraneniam.

VFD farebné zobrazenie na ovládaní



Poznámka: Referenčné zobrazenie, záleží od konfigurácie.








Hlavný vypínač



Začiatok masáže

- 1). Stlačte červené tlačidlo Power pre spustenie masáže, masážne kreslo sa automaticky posunie do mierne ležatej polohy..
- 2). Stlačte požadovaný masážny program a kreslo automaticky detekuje pozíciu ramien a masážnych bodov, čakajte prosím, pokým sa detekcia ukončí. Pre okamžité začatie masírovania bez detekcie, zvolte jeden z „rýchlych programov“
Ak ne zvolíte žiaden automatický program, kreslo sa po 20min vypne. Pre okamžité začatie
- 3). Po ukončení detekcie zaznie signál [di di di...]. Teraz si môžete upraviť pozíciu ramien pomocou tlačidiel hore a dole. Ak počas 10 sekúnd neupravíte manuálne pozíciu ramien, spustí sa automatická masáž. Rovnako môžete spustiť masáž stlačením tlačidla s masážnym programom, čím preskočíte krok automatickej detekcie ramien.

Tlačidlá	Popis	Displej
 POZÍCIA RAMIEN (tlačidlo HORE)	Posúva masážne hlavice smerom hore	
 POZÍCIA RAMIEN (tlačidlo DOLE)	Posúva masážne hlavice smerom dole	

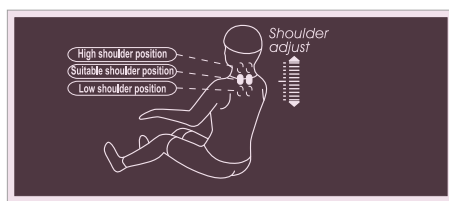









- Vyberte si masážnu metódu - program



- pamäťová masáž: počas detekcie pozície ramien môžete využiť uložený masážny program pod tlačidlom M1 alebo M2 aby ste spustili okamžité masírovanie, nemusíte čakať na ukončenie detekcie, nastavenia sa prevedú podľa uložených údajov v pamäti programu.



Charakteristika automatických programov

Tlačidlo	Popis	Displej
	Rýchle zoznámenie s masážnymi funkciami	F0 Auto
	Uvoľňuje svaly a kosti	F1 Auto
	Znižuje telesnú únavu, obnovuje telesnú aktivitu	F2 Auto
	Hĺbková masáž akupresúrnych bodov, zmiernenie bolesti	F3 Auto
	Vzduchové vankúše na páse, rukách aj nohách pracujú súčasne pre kompletnú relaxáciu tela.	F5 Auto
	Strečing v páse: Vzduchové vankúše stláčajú a pridržajú telo, popri tom sa sklápa chrbtová opierka hore/dole a súčasne sa nakláňajú aj nohy, čím dochádza k natiahnutiu svalov. Medzitým funguje vzduchová masáž aj masážne hlavice.	F6 Auto
	Zmierňuje únavu, zrelaxuje telo, podporuje krvný obeh	F7 Auto
	Podporuje cirkuláciu krvi	F8 Auto

APP vyvolanie automatických programov

Tlačidlo	Popis	Displej
	APP automatické programy: 3 auto módy	A1~A3
	Potvrdenie výberu: V prípade, že aktuálny mód je neplatný stlačte potvrdzovacie tlačidlo, zvuk oznámi, že je neplatný	A1~A3 ^{APP} Auto

- APP spustenie programu



- manuálne funkcie pre hornú a dolnú časť tela

Horná časť tela manuálne funkcie

Tlačidlo	Popis	Displej
SHOULDER GRASP	Ramená: Automaticky nastaví na masáž ramien, nastaviteľná sila a rýchlosť	
KNEAD	Hnetanie: nastaviteľná sila a rýchlosť	
TAP	Klepanie: 2 režimy nastaviteľná sila, šírka a rýchlosť	
KNEAD&TAP	Hnetanie a klepanie: nastaviteľná sila a rýchlosť	
SHIATSU	Shiatsu: 2 režimy, nastaviteľná sila, šírka a rýchlosť	
3D	3D rozdelené na 4 režimy, nastaviteľná sila a rýchlosť	
SPEED	Rýchlosť: 5 úrovni nastavenia	
WIDTH	Šírka: 5 úrovni nastavenia	
BACK STRETCH	Fixná pozícia masáže - jeden bod	H0
	Čiastočná masáž - úsek	H4
	Zónová masáž chrbta	H1
	Masáž vrchnej časti chrbta	H2
	Masáž spodnej časti chrbta	H3
LOWER ADJUST	Pozícia masáže sa dá prispôsobiť hore/dole (pri fixnej a čiastočnej masáži)	Masážne hlavice idú dole Nastavenie pozície masáže je možné
UPPER ADJUST	Pozícia masáže sa dá prispôsobiť hore/dole (pri fixnej a čiastočnej masáži)	Masážne hlavice idú hore len pri čiastočnej a fixnej masáži.

Arm air compression massage on/off and intensity adjustment, 3 grades adjustable

- Funkcie vzduchových vankúšov

Tlačidlo	Popis	Displej
LOWER BODY	Funkcie vzduchových vankúšov pre spodnú časť tela (spolu 3 režimy: spodné telo, chrbát a pás, nohy)	Feet Back Buttocks
INTENSITY	Nastavenie intenzity vzduchových vankúšov (spolu 3 stupne nastavenia)	Feet Back Buttocks
ARTHROSIS TRACTION	Pri funkcii stláčania vankúšov na nohy alebo pri režime na lýtku, môžete zapnúť/vypnúť natiahovanie svalov	
ARM AIR PRESSURE	Intenzita stláčania na ruky - zapnuté/vypnuté (spolu 3 stupne nastavenia)	Arm

- Ostatné funkcie

Tlačidlo	Popis	Displej
Upper body intensity (weaken)	Zmiernenie intenzity masážnych hlavíc - hlavice sa presunú tak, aby sa zmiernila intenzita masáže.	Upper
Upper body intensity (strengthen)	Zvýšenie intenzity masážnych hlavíc - hlavice sa presunú tak, aby sa zvýšila intenzita masáže.	Upper
SOLE ROLLER	Masážne valčeky na nohy - zapnuté/vypnuté (spolu 3 stupne nastavenia)	
HEATER	Infra vyhrievanie chrbta, pocit tepla sa dostaví približne po 3 minútach od zapnutia.	

- Nastavenie času masáže

Tlačidlo	Popis	Displej
TIME	Nastavený čas je 20 minút. Maximálny čas je 40 minút. Po každom stlačení tlačidla sa prirába 5 minút k času až po maximálnu hodnotu 40 minút. Posun času sa opakuje v cykle od 5 - 40 minút.	20 Min



Uhol sklonu chrbta a nôh


Tlačidlo	Popis
	po zatlačení tlačidla kreslo zmení sklon
	Zdvíhanie nôh smerom hore: pri stlačení sa nohy pomaly dvíhajú, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.
	Klesanie nôh smerom dole: pri stlačení nohy pomaly klesajú, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.
	pustením tlačidla sa pohyb zastaví.
	Pohyb opierky smerom dole: pri stlačení opierka pomaly klesá, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.

Rýchly prístup - tlačidlá

Tlačidlo	Popis
	Vypínač: stlačením zapnete/vypnete masážne funkcie
	Pohyb lýtka smerom hore: pri stlačení sa nohy pomaly dvíhajú, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.
	Pohyb lýtka smerom dole: pri stlačení nohy pomaly klesajú, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.
	Pohyb chrbta smerom dopredu - dvíhanie
	Pohyb chrbta smerom dozadu - klesanie

Vypnutie prístroja a ukončenie masáže

- 1). Pre zastavenie masáže, ukončenie všetkých masážnych funkcií a automatický návrat opôr chrbta a nôh do východiskovej polohy stlačte červené tlačidlo. Masážny režim sa tiež ukončí automaticky po uplynutí zvoleného času masáže. V tomto prípade sa nohy a chrbát nevrátia do pôvodnej pozície.
- 2). Po ukončení masáže alebo po vypnutí kresla sa na displeji zobrazí možnosť "Memory Set On" bliká a upozorňuje na možnosť uloženia posledných nastavení masáže a polohy kresla pod jeden z pamäťových programov M1 alebo M2. Podľa potreby uložte posledné nastavenie kresla. Po opätovnom stlačení tlačidla POWER sa kreslo vypne a hlavice sa presunú do pôvodnej polohy (prípadne čakajte 10 sekúnd a kreslo sa vypne automaticky a presunie do pôvodnej polohy.

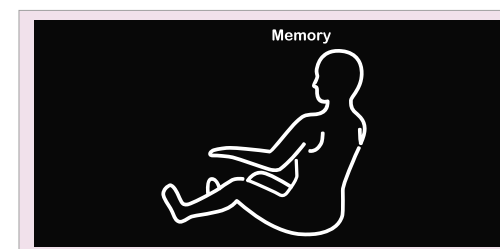

3). Vypnutie prístroja


- Hlavný vypínač v polohe OFF





End massage, power off

- When the massage function in a state of start-up, click “ message on/off” will turn off all the massage function.
- Turn off power

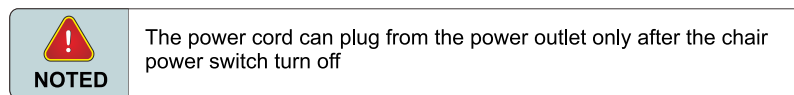

Arm assembly installation

- 1.Find out the plug respond to the arm rest on the bottom of the seat frame, and through out from the square hole which on the fixed steel board.(figure 1)
- 2.Draw out the plug from the square hole on the steel board, respond to every connecting plug(figure 2)

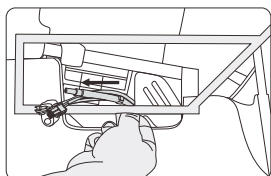


Figure 1

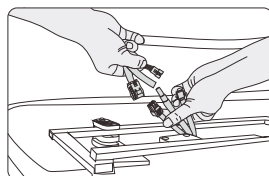


Figure 2

- 3.Draw out the plug on the bottom of the seat frame and connect with the arm rest joint, air pipe responded to the right place (figure 3)
- 4.After connect the responded connector, insert it gently through the square hole on the bottom of the seat frame, be careful not to fold the air pipe (figure 4)

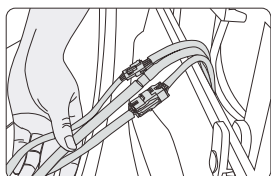


Figure 3

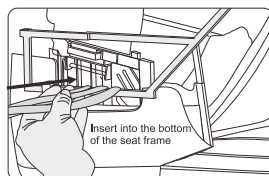


Figure 4

5.As figure, the hook on the arm rest respond to the box on the fix board, the steel board respond to the groove of arm rest.(figure 5)

- 6.Hold the arm rest with your hands, the back armrest is higher than the front, front armrest pin respond to box on the front part of the steel board , (check the connect wire if it is inserted in to the bottom of armrest frame, avoid to get stuck), back armrest pin respond to box on bottom part of the steel board in turn, press down the back part of armrest to fixed two armrest top pin on the steel board. (figure 6)

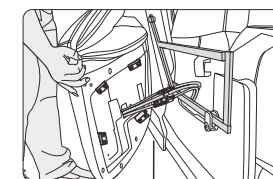
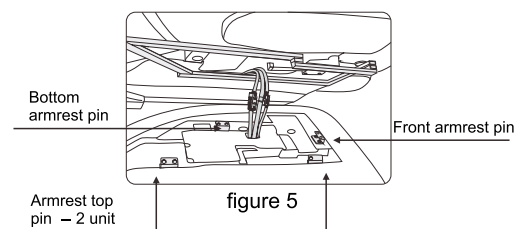


figure 6

Note: the connect wire must be insert into the right place, avoid to get stuck.

- 7.Mount the arm rest to chair frame, the mounts for the arm should slide into their respective locations on the frame of the chair without applying force, press down slightly on the arm to lock into place. then press the armrest make sure the pin into the box on the fixed steel board, and pull it with your hand to check it is fasten tightly.(figure 7)
- 8.Find out the install hole on the front part of the fixed steel board, screw the screws with hex wrench.(Figure 8) .
- 9.Find out the install hole on the behind part of the fixed steel board, screw the screws with hex wrench, finish the installation, same installation of the two armrest. (figure 9) .

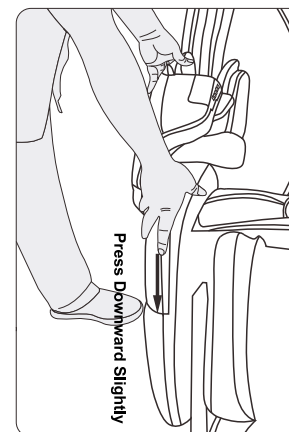


figure 7

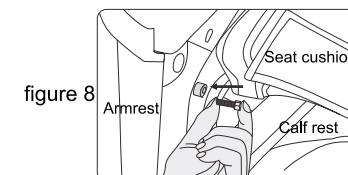


figure 8

Figure: hex head screw fixed in front part of armrest

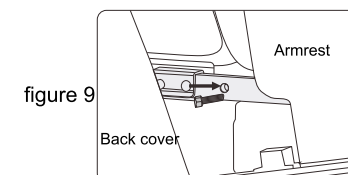


figure 9

figure: hex head screw fixed in back part of armrest

